


Komory badań cieplnych typ KBC

- kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 5", szklaną powłoką ochronną, wysokim kontraście i szerokim kącie widzenia,
- precyzyjna kontrola ustawionej temperatury dzięki wbudowanemu kontrolerowi PID,
- zegar czasu rzeczywistego,
- bezobsługowy powrót do pracy w przypadku nagłego zaniku napięcia
- nastawa temperatury co 0,1 °C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do 250 °C (w opcji do 300 °C),
- dokładność stabilizacji temperatury w geometrycznym środku komory $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$,
- nastawa czasu trwania zadanej temperatury do 1000 godz.,
- wbudowane systemy zabezpieczeń
- akustyczny sygnał zakończenia pracy,
- tryb pojedynczego cyklu pracy (Quick Run) – szybka nastawa temperatury i czasu ekspozycji,
- możliwość wyłączenia odmierzenia czasu pracy,
- autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatur,
- inicjacja odmierzenia czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury,
- możliwość zdefiniowania 20 programów, z możliwością przypisania własnej nazwy programu,
- tryb programu – do 20 w pełni konfigurowanych segmentów:
 - opóźniony start (Delayed Start)
 - ustawienie docelowej temperatury oraz czasu ekspozycji (Step To)
 - kontrolowany przyrost temperatury w stopniach/minutę (Ramp)
 - podtrzymanie aktualnej temperatury z funkcją okresowego przypominania o wymianie wsadu (Hold/Remind)
- blokada ekranowa z czterocyfrowym kodem dostępu – zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w przebiegu programu
- podłączenie do komputera PC przez złącze USB (emulowany port szeregowy) umożliwiające podgląd i rejestrację przebiegu programu
- automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu program (w urządzeniach typ W)
- nadanie własnej nazwy urządzenia przez użytkownika (np. KBC LAB1 itp.)
- wymuszony lub grawitacyjny obieg powietrza,
- pojemności: 17, 39, 75, 115, 142, 150, 220 l,
- komora z blachy nierdzewnej,
- półki z blachy nierdzewnej perforowanej,
- obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
- kominki wentylacyjne,
- zasilanie – 230V/50Hz,

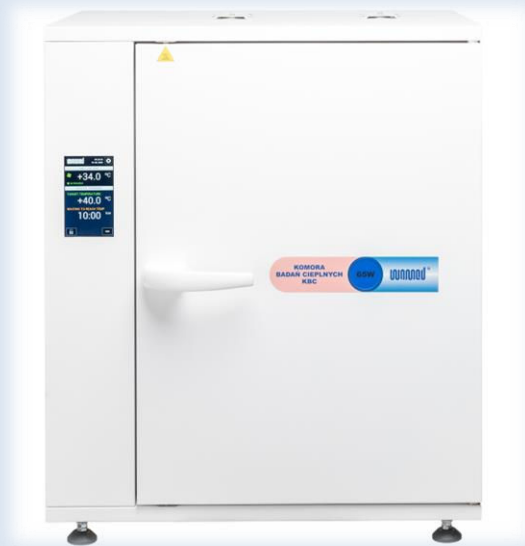

** Opcje dodatkowe
Wykaz opcji dodatkowych na
stronie www.wamed.pl*