

Modele:

- RT-MAG-001/M1** - Stojak dla rozdzielaczy o szerokości szczeliny 6,5 mm i 12,5 mm wraz z zestawem 3 misek odbiorczych
- RT-MAG-001/M2** - Stojak dla rozdzielaczy o szerokości szczeliny od 25 mm do 75 mm wraz z zestawem 3 misek odbiorczych

Akcesoria:

- RT-MAG-001/zM6** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 6,5 mm dla RT-MAG-001/M1
- RT-MAG-001/zM12** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 12,5 mm dla RT-MAG-001/M1
- RT-MAG-001/zM25** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 25 mm dla RT-MAG-001/M2
- RT-MAG-001/zM37** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 37,5 mm dla RT-MAG-001/M2
- RT-MAG-001/zM50** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 50 mm dla RT-MAG-001/M2
- RT-MAG-001/zM75** - Rozdzielacz próbek o szerokości szczeliny 75 mm dla RT-MAG-001/M2
- RT-MAG-001/zM1** - Miska odbiorcza z uchwytami dla RT-MAG-001/M1
- RT-MAG-001/zM2** - Miska odbiorcza z uchwytami dla RT-MAG-001/M2

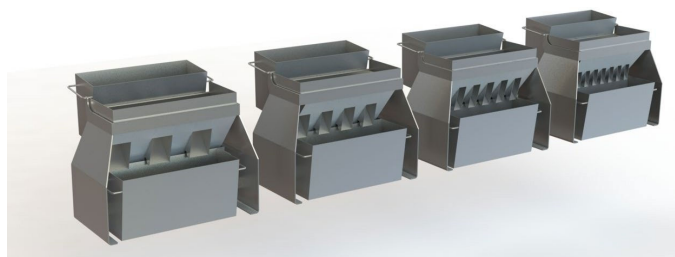
Standardy:

EN 932-1, EN 932-2, ASTM C702

Opis:

Rozdzielacze próbek są idealne do redukcji ziarnistego materiału próbki. Są łatwe w użyciu, łatwe do czyszczenia i modułowe. Na stojaku można zamontować do 4 różnych rozdzielaczy o szerokości szczeliny od 6,5 mm do 75 mm.

Rozdzielacz RT-MAG-001/M dostarczany jest w komplecie z trzema misami odbiorczymi z uchwytami. Stojak wykonany jest z metalu z polimerową powłoką proszkową, rozdzielacz i miski odbiorcze wykonane są ze stali nierdzewnej, co umożliwia ogrzewanie i pracę z gorącymi materiałami, takimi jak mieszanka asfaltowa.

**Dane techniczne:**

	RT-MAG-001/M1		RT-MAG-001/M2			
	RT-MAG-001/zM6	RT-MAG-001/zM12	RT-MAG-001/zM25	RT-MAG-001/zM37	RT-MAG-001/zM50	RT-MAG-001/zM75
Szerokość szczeliny	6,5 mm	12,5 mm	25 mm	37,5 mm	50 mm	75 mm
Liczba slotów	16	12	16	12	8	6
Waga stojaka (ok.)	4,9 kg		9,3 kg			
Wymiary stojak (dł. x szer. x wys.)	270 x 150 x 250 mm		570x300x442 mm			
Waga próbki rozdzielacz	1,6 kg	1,5 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,0 kg
Waga Naczynie odbierające	1,2 kg		3,0 kg			
Wymiary szalka odbiorcza (dł. x szer. x wys.)	210x80x120 mm		510x162x216 mm			