

Modele:

RT-MG-001/30DS - łaźnia wodna do piknometrów, pojemność 30 l

Standardy:

EN 12697-5, EN 12697-12, EN 12697-34



ASTM D1559, ASTM D2041, ASTM D5581, AASHTO T 209, AASHTO T 245

Opis:

RT-MG-001/30DS przeznaczony do kondycjonowania piknometrów, zapewnia wysoką dokładność i równomierny dzięki wysokowydajnemu dolnemu mieszadłu magnetycznemu i połączeniu precyzyjnego czujnika temperatury i regulatora PID, który zapewnia rozdzielczość 0,1 °C. Łaźnia wodna ma wewnętrzny zbiornik o głębokości roboczej 300 mm aby pomieścić piknometry butelkowe o pojemności do 3000 ml pojemności.

RT-MG-001/30DS wykonana w całości ze stali nierdzewnej z wysoce wydajną izolacją termiczną i wyposażony w dla łatwego odprowadzania wody.

Dostarczany w komplecie z wewnętrzną perforowaną półką i pokrywą.

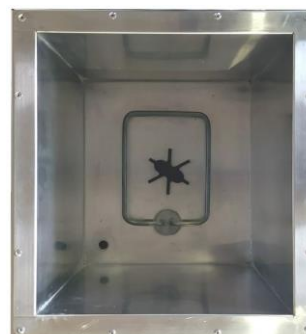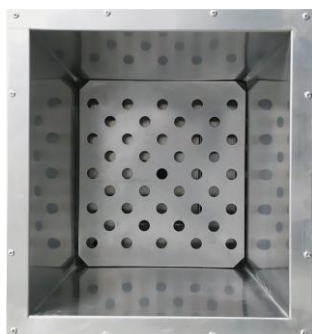

Dane techniczne:

Recyrkulacja (mieszanie wewnętrzne)	Tak
Pojemność	30 L
Zakres temperatur	90 °C
Rozdzielczość	0.1 °C
Dokładność w zakresie 25-60 °C	±0.2 °C
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	320x295x355 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	400x380x495 mm
Pojemność piknometru (typu butelkowego)	6 szt. nakrętek 1000 ml, 4 szt. nakrętek 2000 ml, 2 szt. nakrętek 3000 ml.
Waga (w przybliżeniu)	20 kg
Maks. zapotrzebowanie na moc	1500 W
Zasilanie	220-230 V, 50 Hz, 1 Ph