

Seria szafek COMBISTORAGE UNDERBENCH

Certyfikowany zgodnie z normami EN14470-1, EN61010 i EN14727



Szafki COMBISTORAGE optymalizują przestrzeń w laboratorium!

Indywidualne rozwiązanie zastępujące drewniane lub stalowe meble laboratoryjne kombinacją szaf bezpieczeństwa: na kwasy, zasady i materiały łatwopalne.

Jak wybrać swoją kombinację?

- Zmierz dostępną przestrzeń pod stołem
- W razie potrzeby należy wybrać płytę bazową odpowiednią do dostępnej przestrzeni
- Wybierz modele szafek na kwasy/zasady/lawopalne zgodnie z potrzebami przechowywania.

Każdą szafkę z serii COMIBISTORAGE pod stół można łączyć na płytach bazowych o różnych szerokościach

Różne szerokości i wysokości naszych szafek pozwalają znaleźć rozwiązanie problemów z przechowywaniem w laboratorium

- Lewe drzwi / prawe drzwi / otwieranie szuflady
- 13 możliwych szerokości: od 400 do 1800 mm
- Płyta podstawy: H 80 mm
- Wszystkie nasze modele są dostępne w 2 wysokościach: 620 mm i 720 mm



W ten sposób można uzyskać kombinację kwasów + zasad + substancji łatwopalnych na jednej płycie bazowej.



Wszystkie nasze modele są dostępne z 2 wysokościami:

620 mm.

720 mm.

EO704AS + EOF710

Modułowa i certyfikowana:
rozwiązanie do przechowywania i używania
niebezpiecznych produktów bezpośrednio w
laboratorium.

d

→CECHY TECHNICZNE:

KOMBINOWANY MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

- W całości wykonana z ocynkowanej elektrolitycznie blachy stalowej o grubości od 1 do 1,5 mm, giętej na zimno - kolor szary RAL7035
- Zewnętrzne wykończenie wykonane z kwasoodpornej żywicy epoksydowej i przejście przez tunel termiczny w temperaturze 200 °C
- Izolacja szafy za pomocą paneli z wełny mineralnej o wysokiej gęstości i paneli z siarczanu wapnia
- Wewnętrzne panele wykończeniowe wykonane z HPL o wysokiej odporności na chemikalia i agresywne opary
- Konstrukcja umożliwiająca wymianę części zamiennych w razie potrzeby
- Automatyczne zamykanie drzwi, gdy temperatura otoczenia przekroczy 50 °C
- 30 mm termorozszerzalne uszczelki izolacyjne, które w przypadku wzrostu temperatury zapewniają doskonałe uszczelnienie szafy, zgodnie z normą EN14470-1
- Wlot i wylot powietrza z certyfikowaną zaporą przeciwpożarową zamykającą kanały, gdy temperatura jest wyższa niż 70 °C zgodnie z normą DIN 4102-6
- Wstępne przygotowanie do wentylacji przez kołnierz śred. 100 mm do podłączenia zewnętrznego lub systemu wentylacji filtrującej (patrz rozdział dotyczący wentylacji)
- Iskrobezpieczne mosiężne zawiasy zapewniające doskonałą solidność drzwi
- Szafa wyposażona w uziemienie
- Podnośniki poziomujące
- Zamek drzwi i szuflad na klucz
- Półki wykonane z malowanej stali lub stali nierdzewnej o regulowanej wysokości
- Mocowanie półek na tych samych aluminiowych oczkach z wyłączeniem ryzyka iskrzenia
- Półki przetestowane pod kątem odporności ogniowej - ISO 3864: Sygnalizacja piktogramem
- Certyfikowane jako odporne na ogień przez 90 min, zgodnie z normą EN14470-1 BV (Bureau Veritas)
- Certyfikat zgodności z normą EN14727 BV (Bureau Veritas)



EOF705C



Poziomowanie obudowy.

EOFZ150 + E0705AC
+ EOF706C + E0704BC



Podwójny system izolacji zapobiegający wydostawaniu się szkodliwych oparów i przedostawaniu się gorącego powietrza w przypadku pożaru.

COMBISTORAGE NA KWASY/ZASADY

- W całości wykonana z ocynkowanej elektrolitycznie blachy stalowej o grubości od 1 do 1,5 mm, giętej na zimno - kolor szary RAL7035
- Zewnętrzne wykończenie wykonane z kwasoodpornej żywicy epoksydowej i przejście przez tunel termiczny w temperaturze 200 °C
- Wewnętrzne panele wykończeniowe wykonane z laminatu HPL o wysokiej odporności na chemikalia i agresywne opary
- Konstrukcja umożliwiająca wymianę części zamiennych w razie potrzeby
- Przygotowanie do wentylacji poprzez kołnierz Ø 100 mm do podłączenia zewnętrznego lub filtrującego systemu wentylacji (patrz rozdział dotyczący wentylacji)
- Szafa wyposażona w uziemienie
- Podnośniki poziomujące
- Zamek drzwi i szuflad na klucz
- Półki wykonane z malowanej stali lub stali nierdzewnej o regulowanej wysokości
- Mocowanie półek na tych samych oczkach
- ISO 3864: Sygnalizacja piktogramami
- Certyfikat zgodności z normą EN61010
- Certyfikat zgodności z normą EN14727 BV (Bureau Veritas)



EOF611 + EOFZ110





KOMBI DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW / ZASAD - H 620 / H 720

RODZAJ OTWARCIA	KOD DLA KWASÓW	KOD DLA ZASAD	ZEWNĘTRZNE WYMIARY (szer. x głęb. x wys.)	WYMIARY WEWNĘTRZNE (mszmer. x głęb. x wys.)	POJEMNOŚĆ *	WAGA kg
400 - PRAWO 	EO604AD	EO604BD	395 x 520 x 620		18	51
	EO704AD	EO704BD	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	54
400 - LEWO 	EO604AS	EO604BG	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	18	51
	EO704AS	EO704BG	395x520x720	330 x 430 x 630	18	54
400 - SZUFLADA 	EO604AS	EO604BT	395 x 520 x 620	330x430x530	9	51
	EO704AC	EO704BT	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	9	54
500 - PRAWO 	EO605AD	EO605BD	495x520x620	430 x 430 x 530	24	53
	EO705AD	EO705BD	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	56
500 - LEWO 	EO605AS	EO605BG	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	24	53
	EO705AS	EO705BG	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	56
500 - SZUFLADA 	EO605AC	EO605 BT	495x520x620	430 x 430 x 530	12	53
	EO705AC	EO705 BT	495x520x720	430 x 430 x 630	12	56
600 - PRAWO 	EO606AD	EO606BD	595 x 520 x 620	530x430x530	30	55
	EO706AD	EO706BD	595x520x720	530 x 430 x 630	30	58
600 - LEWO 	EO606AS	EO606BG	595 x 520 x 620	530x430x530	30	55
	EO706AS	EO706BG	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	58
600 - SZUFLADA 	EO606AC	EO606BT	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	15	55
	EO706AC	EO706BT	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	15	58

*Przybliżona pojemność w butelkach o pojemności litra

Standardowy kolor szary RAL7035, dodać "j" do kodu dla szafki żółtej RAL1021. W przypadku półek ze stali nierdzewnej należy zastąpić "V" przez "X" w kodzie artykułu. Podstawa nie jest obowiązkowa, w razie potrzeby należy ją dodać.

→ KOMBI STÓŁ DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW / ZASAD - H 620 / H 720

RODZAJ OTWARCIA	KOD KWASY + ZASADY	WYMIARY ZEWNĘTRZNE (szer. x głęb. x wys.) mm	WYMIARY WEWNĘTRZNE (szer. x głęb. x wys.) mm	POJEMNOŚĆ*	WAGA Kg
1000 - Z DRZWI 	EO610AB	990 x 520 X620	450+450 x 430 x 530	18+18	104
	EO710AB	990 x 520 X720	450+450 x 430 x 630	18+18	110
1000 - SZUFLADA 	EO610ABC	990 x 520 X620	450+450 x 430 x 530	9+9	104
	EO710ABC	990 x 520 X720	450+450 x 430 x 630	9+9	110
1100 - Z DRZWI 	EO611AB	1090 x 520 X620	490+490 x 430 x 530	24+24	104
	EO711AB	1090 x 520 X720	490+490 x 430 x 630	24+24	114
1100 - SZUFLADA 	EO611ABC	1090 x 520 x 620	490+490 x 430 x 530	12+12	104
	EO711ABC	1090 x 520 x 720	490+490 x 430 X630	12+12	114

*Approximate capacity in bottles holding 1 litre

Standard colour Grey RAL7035, add «J» to the code for a yellow cabinet RAL1021. For stainless steel shelves, replace «V» with «X» in the item code. Base plate not compulsory, to be added if necessary.

→ PŁYTY BAZOWE

KOD	WYMIARY (szer. x głęb. x wys.) mm
EOFZ40	400 x 500 x 80
EOFZ50	500 x 500 x 80
EOFZ60	600 x 500 x 80
EOFZ80	800 x 500 x 80
EOFZ90	900 x 500 x 80
EOFZ100	1000 x 500 x 80
EOFZ110	1100 x 500 x 80
EOFZ120	1200 x 500 x 80
EOFZ140	1400 x 500 x 80
EOFZ150	1500 x 500 x 80
EOFZ160	1600 x 500 x 80
EOFZ170	1700 x 500 x 80

EOFZ180 1800 x 500 x 80



Półki retencyjne wykonane
z malowanej stali



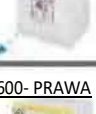
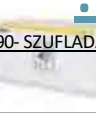
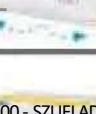
EO706AD



EOF605C + EO606AD + płyta bazowa EOFZ110



→ SZAFKI MAGAZYNOWY DO MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH TYP 90 - H 620 / H 720

RODZAJ OTWARCIA	KOD DLA				
		ZEWNĘTRZNE WYMIARY (szer. x gł. x wys.) mm	WEWNĘTRZNE WYMIARY (szer. x gł. x wys.) mm	POJEMNOŚĆ PAMIĘCI*	WAGA Kg
500- PRAWA 	EOF605D	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
500- LEWA 	EOF705D	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
	EOF605S	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
500- SZUFLADA 	EOF705S	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
	EOF605C	495 x 520 x 620	383 x 349 x 493	12	73
600- PRAWA 	EOF705C	495 x 520 x 720	383 x 349 x 593	12	78
	EOF606D	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
600- LEWA 	EOF706D	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
	EOF606S	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
600- SZUFLADA 	EOF706S	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
	EOF606C	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	82
89 02 DRZWI 	EOF706C	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	87
	EOF 609	890 x 520 x 620	778 x 349 x 493	25	105
890- SZUFLADA 	EOF 709	890 x 520 x 720	778 x 349 x 593	25	110
	EOF 609C	890 x 520 x 620	778 x 349 x 493	25	105
1000 - 2 DRZWI 	EOF 709C	890 x 520 x 720	778 x 349 x 593	25	110
	EOF610	990 x 520 x 620	878 x 349 x 493	27	118
1000- SZUFLADA 	EOF710	990 x 520 x 720	878 x 349 x 593	27	125
	EOF610C	990 x 520 x 620	878 x 349 x 493	27	118
110 02 DRZWI 	EOF710C	990 x 520 x 720	878 x 349 x 593	27	125
	EOF611	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	134
1100- SZUFLADA 	EOF711	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	139
	EOF611C	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	134
	EOF711C	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	139

→ PŁYTY BAZOWE/COKOŁY

KOD	WYMIARY (szer. x gł. x wys.) mm
EOFZ40	400 x 500 x 80
EOFZ50	500 x 500 x 80
EOFZ60	600 x 500 x 80
EOFZ50	800 x 500 x 80
EOFZ90	900 x 500 x 80
EOFZ100	1000 x 500 x 80
EOFZ110	1100 x 500 x 80
EOFZ120	1200 x 500 x 80
EOFZ140	1400 x 500 x 80
EOFZ150	1500 x 500 x 80
EOFZ160	1600 x 500 x 80
EOFZ170	1700 x 500 x 80
EOFZ180	1800 x 500 x 80



Taca retencyjna z
malowaną stalową kratką.

*Przybliżona pojemność w butelkach o pojemności 1 litra.

Standardowy kolor szary RAL7035, w przypadku szafki w kolorze żółtym RAL 1021 do kodu należy dodać literę „J”. W przypadku półek stalowych należy zastąpić literę „V” literą „X” w kodzie produktu. Podstawa nie jest obowiązkowa, w razie potrzeby należy ją dodać.



→ WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE (opcjonalne)

KOD	OPIS	WYMIARY (szer. x głęb. x wys.) mm	RETENCA (LITRY) OBJĘTOŚĆ	POJEMNOŚĆ PAMIĘCI*
RIPFS0V	Dodatkowa półka ze stali malowanej do szafy z 1 drzwiami WS00	380x330x30	4	12
RIPFS0X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 1 drzwiami WS00	380x330x30	4	12
RIPF60V	Dodatkowa półka ze stali lakierowanej do szafy z 1 drzwiami W600	480x330x30	5	15
RIPF60X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 1 drzwiami W600	480x330x30	5	15
RIPF100V	Dodatkowa półka ze stali malowanej do kabiny i net z 2 drzwiami W1000	875x330x30	9	27
RIPF100X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 2 drzwiami W1000 Dodatkowa	875x330x30	9	27
RIPF110V	półka ze stali malowanej do kabiny i net z 2 drzwiami W1100	975x330x30	10	30
RIPF110X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 2 drzwiami W1100	975x330x30	10	30
RIPCS140V	Dodatkowa półka z malowanej stali do szafy z 1 drzwiami W400	325x420x30	4	9
RIPCS150V	Dodatkowa półka z malowanej stali do szafy z 1 drzwiami WS00	452x420x30	6	12
RIPCS160V	Dodatkowa półka z malowanej stali do szafy z 1 drzwiami W600	525x420x30	7	15
RIPCS100V	Dodatkowa półka z malowanej stali do szafy z 2 drzwiami W1000 (do kwasów)	385x420x30	5	9
RIPCS110V	Dodatkowa półka z malowanej stali do szafy z 2 drzwiami W1100 (do kwasów)	485x420x30	6	12
RIPCS140X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 1 drzwiami W400	325x420x30	4	9
RIPCS150X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 1 drzwiami WS00	452x420x30	6	12
RIPCS160X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 1 drzwiami W600	525x420x30	7	15
RIPCS100X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 2 drzwiami W1000 (do podstaw)	385x420x30	5	9
RIPCS110X	Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej do szafy z 2 drzwiami W1100 (do podstaw)	485x420x30	6	12
AT100	Wizualny i dźwiękowy system alarmowy z transmisją telefoniczną wyposażony w cyfrowy termostat z sondą T (0C) wewnątrz kabiny i sieci		-	-
TIM24	Licznik dzienny	-	-	-
K89033	Wewnętrzna gaśnica na dwutlenek węgla z automatycznym wyzwaniem termicznym (62°C)	090x280	-	-
K89590	Zestaw 4 kółek (2 samoblokujące) do szafek podblatowych (H105 mm)	(H105mm)	-	-
K89590/10	Zestaw 4 kółek (2 samoblokujące) do szafek podblatowych (H100 mm)	(H100mm)		

*Przybliżona pojemność w butelkach o pojemności 1 litra

→ WENTYLACJA (opcjonalnie)

KOD	OPIS	WYMIARY (szer. x głęb. x wys.) mm
EOF100BPMY11	Skrzynka świeżego powietrza z kabiną zasilającą i skrzynką filtra - średnica wylotu 100 mm	270x260x430
EOF100ABPMY11	Skrzynka świeżego powietrza ATEX z kabiną zasilającą i skrzynką filtra - średnica wylotu 100 mm	270x260x430
K89007	Filtr z węglem aktywnym (do wymiany co najmniej dwa razy w roku)	235x110x15
F100	0 Kołnierzy przyłączeniowy 100 mm do silnika EOF100BPMY11 (obowiązkowy do wentylacji szafek podblatowych)	Ø100 mm
KIT2A	Zestaw przyłączeniowy dla DWÓCH szaf (elastyczna osłona, trójnik, zaciski) (montaż fabryczny)	sortie Ø100 mm
KIT3A	Zestaw przyłączeniowy do szaf (elastyczna osłona, trójnik, zaciski) (montaż fabryczny)	sortie Ø100 mm
GFKIT100	Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy (1 metr węża o średnicy 100 mm i 2 zaciski)	Ø100 - L1000 mm
CFNUB	Certyfikowana jednostka filtrująca zgodna z normą NF15-211 dla szafek bezpodłogowych, wyposażona w kółka, 2 wyloty wentylacyjne, z alarmem wizualnym i dźwiękowym	400x500x650
CFNUBLH	Jednostka filtrująca wyprodukowana zgodnie z normą NF15-211 dla szafek podblatowych, wyposażona w kółka, 2 wyloty wentylacyjne	400x500x650
EOAS	Filtr z węglem aktywnym do rozpuszczalników (filtr wstępny w zestawie)	510x405x60
EOBE	Filtr z węglem aktywnym do kwasów (filtr wstępny w zestawie)	510x405x60
EOMP	Filtr z węglem aktywnym do rozpuszczalników i kwasów (filtr wstępny w zestawie)	510x405x60
EOPF	Filtr wstępny	510x405x15

*To obtain the complete list of the connection accessories, see the chapter on ventilation of this catalogue and the current price list