



PRZEZNACZENIE:

Dejonizator typu DJ10 jest nowoczesnym aparatem do uzdatniania wody, metodą odwróconej osmozy, umożliwiającym otrzymywanie wody wysokooczyszczonej, do większości zastosowań laboratoryjnych. Produkowana woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wody I i II stopnia oraz Farmakopei Polskiej X.

CHARAKTERYSTYKA:

Produkcja wody oczyszczonej odbywa się bezpośrednio z wody wodociągowej. Proces oczyszczania wody jest kontrolowany przez sterownik wyposażony w wyświetlacz tekstowy.

Informacje o braku lub zbyt niskim ciśnieniu wody zasilającej, zużyciu filtrów wstępnych, czy też lampy UV (opcja) są sygnalizowane poprzez wyświetlanie komunikatów.

Wartość przewodności elektrycznej właściwej wody uzyskiwana przez urządzenie to: $0,05 \pm 0,07 \mu\text{S/cm}$.

W skład standardowego wykonania wchodzi membrana osmotyczna oraz filtry: wstępny, sedymentacyjny i węglowy.

Dodatkowo każdy aparat wyposażony jest w wewnętrzny zbiornik ciśnieniowy na wodę dejonizowaną o pojemności 22 dm^3 .


DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony aparatu: I
Wydajność: ok. $10 \text{ dm}^3/\text{h}$
Napięcie zasilania: $230\text{V} / 50\text{Hz}$
Masa: ok. 30 kg



Opcje wyposażenia

Typ aparatu	Wyposażenie
Dejonizator DJ10	standardowe
Dejonizator DJ10 plus	z pompą
Dejonizator DJ10 UV	z lampą i filtrem mikrobiologicznym
Dejonizator DJ10 pro	z pompą, lampą i filtrem mikrobiologicznym

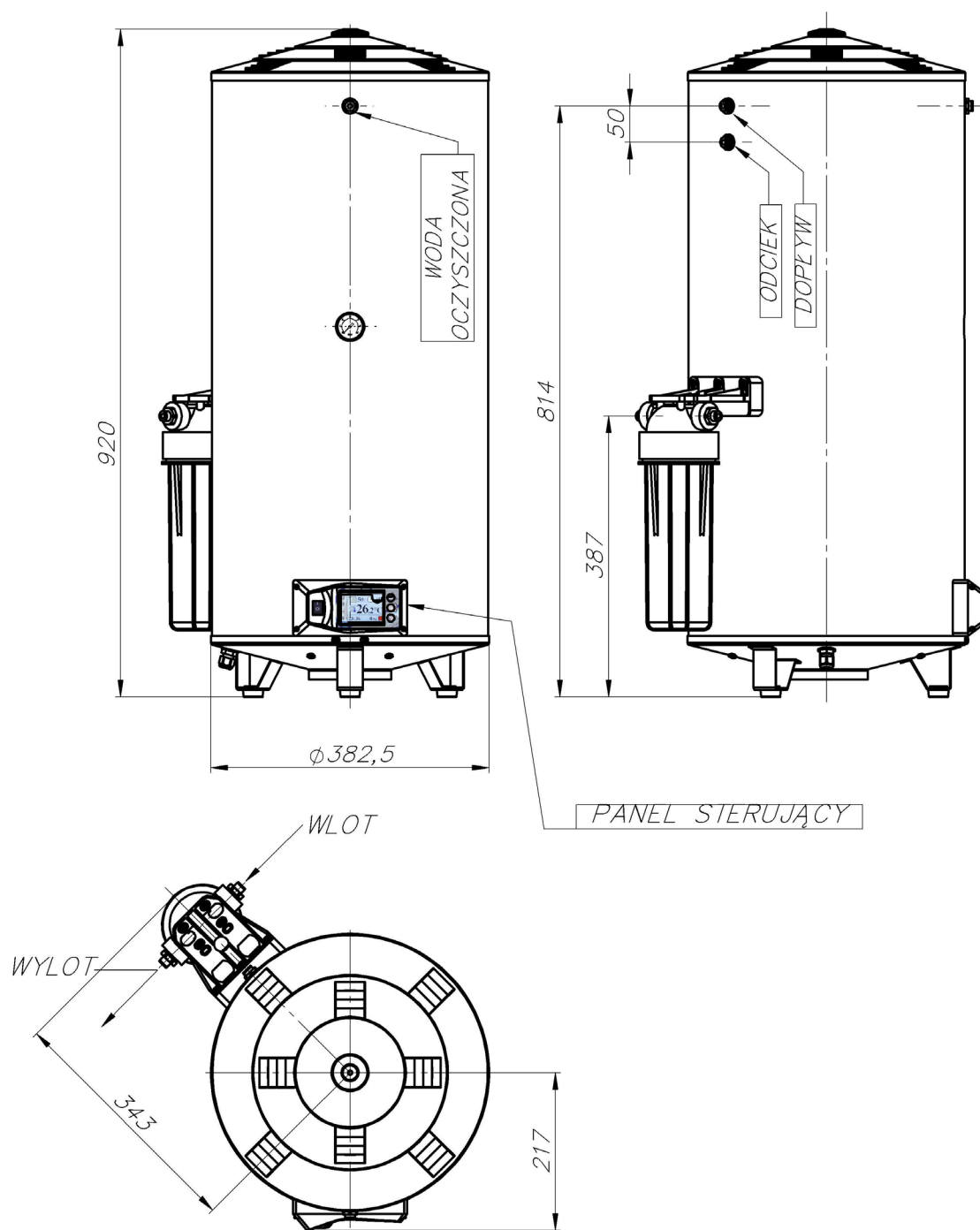

Wymiary gabarytowe dejonizatora typu DJ10