



Wagosuszarka KERN DAB

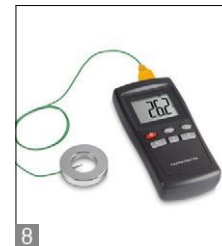

NOWOŚĆ

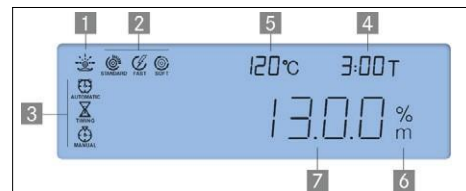

Wagosuszarka z przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem oraz 15-oma programami suszenia.

STANDARD



OPCJA



Cechy

- Podświetlany wyświetlacz LCD , cyfry o wysokości 14 mm
- 1 Aktywny proces suszenia
- 2 Aktywny proces ogrzewania
- 3 Aktywny przełącznik kryteriów
- 4 Poprzedni czas suszenia
- 5 Aktualna temperatura
- 6 Wyświetlacz temperatury %
- 7 Przejściowy wynik wilgotności - %
- **Halogenowa grzałka kwarcowa 400 W**
- **Okno do obserwacji próbki z góry** , przydatne podczas początkowego ustawienia
- **Pamięć wewnętrzna** automatycznej sekwencji 15 całkowitych oraz 5 przeprowadzonych procesów suszenia
- Ostatnia zmierzona wartość pozostaje na wyświetlaczu dopóki nie zostanie zastąpiona kolejnym pomiarem.
- **W zestawie 50 tacek na próbki**
- **Podręcznik obsługi:** Przykłady praktycznego zastosowania czy ustawień są opisane w instrukcji obsługi.

Akcesoria

- **Aluminiowa szalka na próbki**, Ø 90 mm , opakowanie 80 sztuk, KERN MLB-A01A
- **Okrągły filtr z włókna szklanego** np. dla próbek zachłapanych lub z osadem. KERN RH-A02
- 8 **Zestaw do kalibracji temperatury** składający się z czujnika pomiarowego i urządzenia z wyświetlaczem , KERN DAB-A01
- **RS-232/adapter Ethernet** do podłączenia do sieci Ethernet , KERN YKI-01
- **RS-232/adapter Bluetooth** do podłączenia urządzeń obsługujących Bluetooth takich jak drukarki, tablety, laptopy, smartfony itp., KERN YKI-02
- **RS-232/adapter WiFi** do podłączenia bezprzewodowego do sieci i urządzeń WLAN takich jak tablety, laptopy lub smartfony, KERN YKI-03
- **Drukarka termiczna**, KERN YKB-01N

Model KERN	DAB 100-3
Odczyt [d]	0,001 g 0,01 %
Zakres ważenia [Max]	110g
Powtarzalność, waga próbki 10g	0,02%
Wyświetlanie po suszeniu (z możliwością przełączania w każdym momencie)	
Wilgotność [%] = Zawartość wilgoci (M) w mokrej masie (W)	0-100 %
Stopień suchości [%] = zawartość masy suchej	100-0 %
Zawartość wilgotności (M)	Wartość bezwzględna w [g]
Zakres temperatury	35 °C - 160 °C skokowo co 1 °C
Tryby suszenia	Suszenie standardowe Delikatne suszenie Szybkie suszenie
Wyłączanie kryteriów	• Automatyczne wyłączenie (przy spadku wagi o 2mg w czasie 45s) • Czas kontrolowany wyłącznikiem (3min–99h59min, stopniowo co 10s)
Wywoływanie pomiarów	• Na końcu procesu suszenia, ręcznego lub automatycznego (tylko w połączeniu z drukarką KERN YKC-01)
Ogólne wymiary s x g x w	240x365x180 mm
Waga netto	4,82 kg
Opcja: Świad. wzorcowania DKD	963-127

Piktogramy KERN

 Automatyčna kalibracja wewnętrzna. Ustawianie dokładności za pomocą wewnętrznej masy kalibracyjnej	 Poziom A zgodny z recepturą: Oddzielna pamięć dla tary czyli wagi pojemnika oraz składników (suma netto).	 Ważenie podsalkowe: Wspornik z hakiem do ważenia podsalkowego.
 Program CAL do przeprowadzania kalibracji i ustawiania dokładności z wykorzystaniem zewnętrznego odważnika kalibracyjnego.	 Poziom B zgodny z recepturą: Pamięć wewnętrzna z całą ilością i wielkością składników wynikających z receptury. Porady dla użytkownika znajdują się na wyświetlaczu.	 Praca na baterii: Gotowa do pracy na baterii. Typ baterii jest określony do każdego urządzenia.
 Pamięć: pojemność pamięci wagi np. do zapisywania danych artykułu, danych ważenia, tary, PLU itd.	 Poziom C zgodny z recepturą: Pamięć wewnętrzna z całą ilością i wielkością składników wynikających z receptury. Porady dla użytkownika znajdują się na wyświetlaczu. Dodatkowo, wygodne funkcje takie jak kody kreskowe oraz funkcje ponownego obliczania.	 Zestaw akumulatorów do ładowania:
 Interfejs danych RS-232: do podłączenia wagi z drukarką, komputerem lub siecią.	 Zsumowany poziom A: ważone elementy mogą być dodane razem, a ich suma może być wydrukowana.	 Adapter sieciowy: 230V/50Hz w standardowej wersji dla krajów UE. Są dostępne wersje dla USA, Australii i Wielkiej Brytanii.
 Interfejs danych RS-485: do podłączenia wagi do drukarki, komputera lub urządzeń peryferyjnych. Wysoka odporność na elektromagnetyczne zakłócenia.	 Zsumowany poziom C: pamięć wewnętrzna dla wszystkich receptur z nazwą i wielkością składników. Porady znajdują się na wyświetlaczu. Dodatkowo, wygodne funkcje takie jak kody kreskowe oraz funkcje ponownego obliczania.	 Standardowy na UE zasilacz: 230V/50Hz wbudowany w wadze. Na życzenie więcej typów dla GB, AUS lub USA.
 Interfejs danych USB: do podłączenia wagi do drukarki, komputera czy innych urządzeń peryferyjnych.	 Tensometry: Elektryczny rezystor na elastyczne zniekształcenie korpusu.	
 Interfejs danych Bluetooth: do przesyłania danych z wagi do drukarki, komputera czy urządzeń peryferyjnych.	 Zasada kamertonu: Rezonans wynikający z elektromagnetycznego wzbudzenia powoduje drgania.	
 Interfejs danych WLAN: do transferu danych z wagi do drukarki, komputera czy urządzeń peryferyjnych	 Określenie procentowe: określenie procentowego odchylenia w stosunku do wielkości docelowej (100 %).	 Kompensacja siły elektromagnetycznej: Cewka wewnątrz magnesu stałego. Dla ważeń bardzo dokładnych.
 Wyjścia sterowania (wyłącznik optyczny, cyfrowy I/O): do podłączenia przełączników, lampek sygnalizacyjnych, zaworów itp.	 Jednostki ważenia: mogą być zmienione niemetryczne za pomocą przycisku. Wejdź na stronę internetową KERN i zobacz więcej szczegółów. Dolny i górny limit można indywidualnie zaprogramować np. dozowanie, sortowanie czy porcjowanie.	 Technologia pojedynczego ogniwa: Zaawansowana wersja zasady kompensacji z wysoką dokładnością.
 Interfejs drugiej wagi: do bezpośredniego podłączenia drugiej wagi.	 Ważenie bez wibracji: (program do ważenia zwierząt) Gdy warunki podczas ważenia są niestabilne, waga właściwa jest obliczana jako średnia wartość.	 Możliwa legalizacja: czas potrzebny na legalizację jest określony w piktogramie.
 Interfejs sieciowy: do podłączenia skali do sieci Ethernet. Dla produktów Kerna można użyć konwertera RS-232/LAN.	 Ochrona przed kurzem i rozbryzgiwaną wodą IPxx: Typ ochrony jest pokazany na piktogramie. Szczegóły w słowniczku.	 Możliwa kalibracja DAkKS: Czas do przeprowadzenia kalibracji DAkKS jest pokazany w dniach na piktogramie.
 Raport GLP/ISO: Na wadze wyświetlona jest waga, data oraz czas, pomimo połączenia z drukarką.	 Ochrona przed eksplozją ATEX: Nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach przemysłowych, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Oznaczenie ATEX jest określone dla każdego urządzenia.	 Wysyłka w paczce: Czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki jest pokazany na piktogramie.
 Raport GLP/ISO: z wagą, danymi i datą. Tylko z drukarkami KERN, zobacz „Akcesoria”	 Ze stali nierdzewnej. Waga jest chroniona przed korozją.	 Wysyłka na palecie: Czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki jest pokazany w dniach na piktogramie.
 Liczenie ważonych elementów: powiązane ze spisem w tabeli. Na wyświetlaczu widać elementy i ich wagę.		 Gwarancja: Okres gwarancji jest pokazany na piktogramie.

Naszym biznesem jest precyzja

Do zapewnienia wysokiej precyzji Twojej wagi KERN oferuje wiele odpowiednich testów w granicach błędów w międzynarodowej klasie OIML E1-M3 od 1 mg - 2000 kg. W połączeniu ze świadectwem wzorcowania DKD można przeprowadzić właściwą kalibrację.

Dzisiejsze laboratorium kalibracji DAkKS KERN jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wyposażonych laboratoriów kalibracji wagi, testów ważenia oraz i obciążeń urządzeń pomiarowych w Europie.

Dystrybutor KERN:

Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji, możemy przeprowadzić kalibrację wag DKD, testowanie ważenia oraz obciążeń urządzeń pomiarowych 24 godzinny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zakres usługi:

- kalibracja wagi z maksymalnym obciążeniem do 6 t
- kalibracja wagi w zakresie od 1 mg – 500 kg
- zarządzanie bazą danych jeśli chodzi o sprawdzanie wyposażenia oraz przypomnienie o serwisie
- kalibracja obciążeń pomiarowych urządzeń
- świadectwo wzorcowania DKD w dostępnych językach.

MERAZET

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 8644 621, +48 61 8644 600, fax: +48 61 8651 933
e-mail: laboratorium@merazet.pl, <http://www.merazet.pl>