



Szybkość, Prostota i przystępna cena

Nowe wagi suszarki OHAUS MB23 i MB25 łączą wysoką jakość oraz wytrzymałą i kompaktową konstrukcję. MB23 i MB25 zapewniają niezawodne i dokładne wyniki w szerokiej gamie aplikacji.

Standardowe funkcje obejmują:

- **Elastyczna Wydajność** – OHAUS MB23 i MB25 zapewnia dokładne wyniki o rozdzielczości 0.1% lub 0.05%. Dzięki wyborowi ogrzewania podczerwonego lub halogenowego, idealnie nadaje się do tekstyliów, ścieków, ceramiki, żywności i innych zastosowań które wymagają elementów grzewczych IR i pomiarów z dokładnością 0.1% lub 0.05%.
- **Łatwa w użytkowaniu** – Konfiguracja i obsługa są niesamowicie łatwe. Wystarczy nacisnąć przycisk temperatury lub czasu aby ustawić parametry suszenia, dodać próbkę i rozpocząć okres testowania. Sprawia to że MB23 i MB25 nadają się idealnie do rutynowych testów dla operatorów o wszystkich poziomach umiejętności.
- **Kompaktowy, łatwy w czyszczeniu projekt** – Kompaktowa obudowa (17 x 13 x 28 cm) OHAUS MB23 i MB25 została zaprojektowana aby zajmować mało miejsca. Łatwa w czyszczeniu komora grzewcza jest idealna do częstego użytkowania...

MB23 i MB25 Waga suszarki

Specyfikacja

Model	MB23	MB25
Zakres	110g	
Powtarzalność (Std Dev) (g)	0.3% (3g Próbką) 0.2% (10g Próbką)	0.2% (3g Próbką) 0.05% (10g Próbką)
Rozdzielczość	0.1% / 0.01g	0.05% / 0.005g
Rozmiar próbki	Typowo 3g do 20g , 0.5g min.	
Interfejs	Dwukierunkowy RS-232	
Timer	1 - 99 minut, 30-sekundowy przyrost do 60 minut	
Technologia grzewcza	Promiennik IR (nieszklny)	Halogen
Zakres temperaturowy	50°C do 160°C przyrost co 5°	
Zasilanie	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	
Zakres tary	Odejimowanie od maksymalnego zakresu	
Temperatura pracy (otoczenia)	5° to 40°C	
Typ wyświetlacza	Niestandardowy podświetlany LCD	
Wyświetlanie	% Wilgotność lub % ciało stałe lub Waga (g), temperatura, time	
Rozmiar panelu (przekątna)	90 mm	
Wymiary (W x H x D)	17 x 13 x 28 cm	
Waga netto	2.3 kg	
Waga paczki	3.9 kg	
Dołączone akcesoria		
Szalka jednorazowa (Ilość 50)	Standard	
Oslona robocza	Standard	
Uchwyt do szalek	Opcjonalny (PN 11113873)	Standard

Models are CE, CSA/UL and FCC approved




Dzięki kompaktowym wymiarom OHAUS MB23 i MB25 zmieszczą się na każdym stole



OHAUS MB23 jest wyposażony promiennik IR natomiast MB25 używa halogenowej technologii grzewczej

Zewnętrzne wymiary

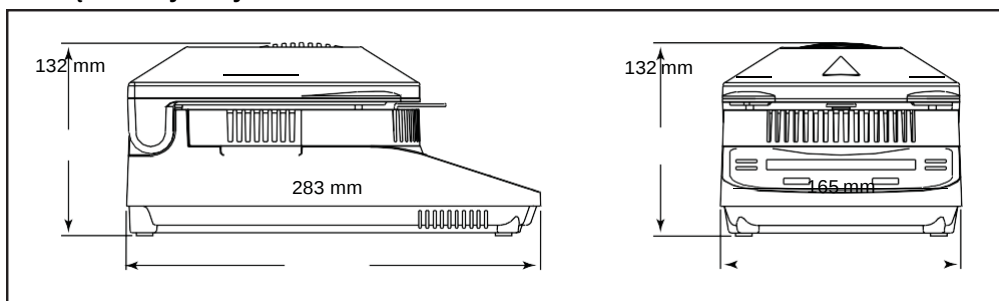

Opcje i akcesoria

Numer OHAUS

Zabezpieczenie przed kradzieżą80850000
Zabezpieczenie (Kensington® type)80850043
Zestaw kalibracji temperatury11113857
50g M1 Ciężarek kalibracyjny11117146

Szalka jednorazowa (80/Pudelko)80850086
Szalka z włókna szklanego (200/Pudelko).....80850087
Szalka wielorazowa (3/sztuki).....80850088

STP103 Drukarka Termiczna EU.....80251993
STP103 Drukarka Termiczna UK.....80251994
CBM910 Drukarka Uderzeniowa EU.....80252043
SRP275 Drukarka uderzeniowa UK80251989
Kabel, STP10380252581
Kabel, CBM91080252571
Kabel, SRP275.....21253677

Industry Leading Quality and Support

All OHAUS MB Series Moisture Analyzers are manufactured under an ISO 9001:2000 Registered Quality Management System. Our rugged construction and stringent quality control have been hallmarks of all OHAUS products for over a century.

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 8644 621, +48 61 8644 600, fax: +48 61 8651 933

e-mail: laboratorium@merazet.pl, <http://www.merazet.pl>

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000

Registered Quality Management System

