





Zbiorniki VOYAGEUR

Producent: AIRLIQUIDE

Linia zbiorników VOYAGEUR została zaprojektowana specjalnie do transportu produktów biologicznych. Wnętrze wykonane z porowatego materiału, który absorbuje ciekły azot, dzięki czemu próbki utrzymywane są w bezpiecznej dla nich fazie gazowej. Transport próbek jest całkowicie bezpieczny dzięki całkowitemu wyeliminowaniu ryzyka wycieku azotu.

Podstawowe akcesoria:

- podstawa na kółkach - A
- plastikowa osłona na zbiornik - B
- czujnik umożliwiający śledzenie wahań temperatury - C
- pokrywa - D
- kieszenie na próbki i torby - E

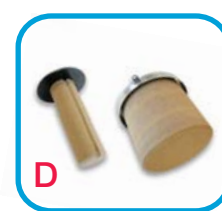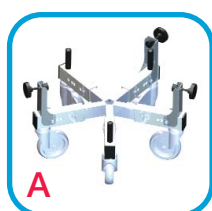

Parametry techniczne:

Modele	Voyageur 2	Voyageur 5	Voyageur 12	Voyageur Plus
Charakterystyka				
Pojemność użytkowa [l]	1,75	6,5	15	20,6
Średnica szyjki [mm]	30	50	80	215
Waga pustego naczynia [kg]	2,4	7,5	11,6	14,2
Waga pełnego naczynia [kg]	3,5	11,3	20	20
Średnica zewnętrzna [mm]	174	248	308	356
Pojemność absorbowana [l]	1,35	4,8	10,5	7,2
Wysokość całkowita [mm]	395	550	570	575
Dziennie odparowanie [l/dzień]*	0,1	0,13	0,24	0,8
Dynamiczny czas trzymania [dni]**	8	23	28	6
Liczba kanistrów	2	2	2	-
Średnica kanistrów [mm]	26	41	71	-
Wysokość kanistrów [mm]	120	280	280	-
Liczba poziomów kieliszków	1	2	2	-
Całkowita pojemność 0,25 ml słomek	220	1040	3280	-
Całkowita pojemność 0,5 ml słomek	100	400	1320	-
Całkowita pojemność 2 ml fiolek (na uchwytach do ampulek)	-	84	252	500 (pudełko 100 fiolek)
Całkowita pojemność 5ml fiolek (na uchwytach do ampulek)	-	42	126	243 (pudełko 81 fiolek)
Całkowita pojemność toreb DF700	-	-	-	6
Inne torby	-	-	-	Na zapytanie

* dziennie odparowanie i statyczny czas trzymania został zmierzony w 20°C, 1013 mb, (zbiornik nieruchomy, zamknięte wieczko).

Wartości te są nominalne i mogą się różnić w zależności od zużycia i tolerancji wykonania.

**wartość orientacyjna, która może się znacznie różnić w zależności od czasu napełnienia.

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865

19 33

e-mail: laboratorium@merazet.pl