



Wysoce precyzyjna waga z automatyczną regulacją, także z legalizacją EC typu [M]

Cechy

- **Łatwa w użyciu:** wszystkie podstawowe funkcje mają własny przycisk na klawiaturze
- **Automatyczna regulacja wewnętrzna,** przeprowadzana co 2 godziny, gwarantuje wysoką dokładność i czyniąc wagę niezależną od lokalizacji
- **Wskaźnik zakresu ważenia:** wskaźnik słupkowy wyświetla aktualne wykorzystanie zakresu ważenia
- **Interfejs USB** do przesyłu danych ważenia do: komputera, drukarki, Pendrive'a.
- **Ochrona przeciwwiatrowa** Standard w modelach [Max] = 600 g, Przestrzeń ważenia S×G×W 145×160×80 mm
- **1 EWJ 300-3H: Duża szklana osłona przeciwwiatrowa**
Z 3 drzwiczkami dla łatwego dostępu do

ważonego przedmiotu
Przestrzeń ważenia W×D×H
155×175×217 mm

Dane techniczne

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, Wysokość cyfr 16,5 mm
- Pole ważące, (materiał stal nierdzewna)
A Ø 80 mm
B Ø 120 mm
C Ø 135 mm
D S×G 155×145 mm
- Wymiary całkowite S×G×W
220×315×90 mm (bez osłony)
220×340×321 mm (z osłoną)
- Temperatura pracy
KERN EWJ: 15 °C/35 °C
KERN EWJ-M: 15 °C/30 °C


Akcesoria

- **Pokrywa robocza,** w standardzie, może być ponownie zamówiona, zakres dostawy 5 sztuk, KERN EWJ-A04S05
- **Wewnętrzny akumulator,** czas działania do 15h bez podświetlenia, czas ładowania około. 4 h,

KERN KFB-A01

- **Interfejs USB** do dwukierunkowej wymiany danych między wagą / wago suszarką i komputerem. Zakres dostawy: Kabel USB, sterownik, Oprogramowanie Balance Connection, KERN DBS-A02
- **RS-232/Ethernet adapter** do podłączenia do sieci Ethernet bazującej na protokole IP KERN YKI-01
- **RS-232/WiFi adapter** dla bezprzewodowego podłączenia do sieci i urządzeń obsługujących WLAN np. Tablety, laptopy smartfony, KERN YKI-03
- Dalsze szczegóły i więcej akcesoria w katalogu w zakładce akcesoria

STANDARD

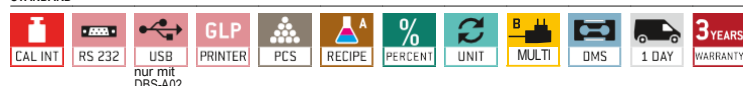

OPTION



FACTORY



Model KERN	Zakres pomiarowy [Max] g	Dokładność [d] g	Weryfikacja wartości [e] g	Minimalne obciążenie [Min] g	Liniowość g	Pole ważące	Opcjonalnie			
							Legalizacja		DAkkS Certyfikat kalibracji	
							M KERN		DKD KERN	
EWJ 300-3	300	0,001	-	-	± 0,003	A	-		963-127	
EWJ 300-3H	300	0,001	-	-	± 0,003	A	-		963-127	
EWJ 3000-2	3000	0,01	-	-	± 0,05	C	-		963-127	
UWAGA. W przypadku zastosowania wymagającego weryfikacji proszę zlecić ją w momencie składania zamówienia. Początkowa weryfikacja nie jest możliwa w późniejszym terminie. Do legalizacji w fabryce potrzebujemy dokładnego adresu lokalizacji użytkownika.										
EWJ 600-2SM	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	B	965-216		963-127	
EWJ 600-2M	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	B	965-216		963-127	
EWJ 6000-1SM	6000	0,1	1	5	± 0,3	D	965-217		963-128	
EWJ 6000-1M	6000	0,1	1	5	± 0,3	D	965-217		963-128	

Nowy model

Piktogramy KERN

 CAL INT	Automatyczna kalibracja wewnętrzna. Ustawianie dokładności za pomocą wewnętrznej masy kalibracyjnej	 RECIPE A	Poziom A zgodny z recepturą: Oddzielna pamięć dla tary czyli wagi pojemnika oraz składników (suma netto).	 UNDER	Ważenie podszalkowe: Wspornik z hakiem do ważenia podszalkowego.
 CAL EXT	Program CAL do przeprowadzania kalibracji i ustawiania dokładności z wykorzystaniem zewnętrznego odważnika kalibracyjnego.	 RECIPE B	Poziom B zgodny z recepturą: Pamięć wewnętrzna z całą ilością i wielkością składników wynikających z receptury. Porady dla użytkownika znajdują się na wyświetlaczu.	 BAI I	Praca na baterii: Gotowa do pracy na baterii. Typ baterii jest określony do każdego urządzenia.
 MEMORY	Pamięć: pojemność pamięci wagi np. do zapisywania danych artykułu, danych ważenia, tary, PLU itd.	 RECIPE C	Poziom C zgodny z recepturą: Pamięć wewnętrzna z całą ilością i wielkością składników wynikających z receptury. Porady dla użytkownika znajdują się na wyświetlaczu. Dodatkowo, wygodne funkcje takie jak kody kreskowe oraz funkcje ponownego obliczania.	 ACCU	Zestaw akumulatorów do ładowania:
 RS 232	Interfejs danych RS-232: do podłączenia wagi z drukarką, komputerem lub siecią.	 SUM A	Zsumowany poziom A: ważone elementy mogą być dodane razem, a ich suma może być wydrukowana.	 230 V	Adapter sieciowy: 230V/50Hz w standardowej wersji dla krajów UE. Są dostępne wersje dla USA, Australii i Wielkiej Brytanii.
 RS 485	Interfejs danych RS-485: do podłączenia wagi do drukarki, komputera lub urządzeń peryferyjnych. Wysoka odporność na elektromagnetyczne zakłócenia.	 SUM C	Zsumowany poziom C: pamięć wewnętrzna dla wszystkich receptur z nazwą i wielkością składników. Porady znajdują się na wyświetlaczu. Dodatkowo, wygodne funkcje takie jak kody kreskowe oraz funkcje ponownego obliczania.	 230 V	Standardowy na UE zasilacz: 230V/50Hz wbudowany w wadze. Na życzenie więcej typów dla GB, AUS lub USA.
 USB	Interfejs danych USB: do podłączenia wagi do drukarki, komputera czy innych urządzeń peryferyjnych.	 DMS	Tensometry: Elektryczny rezystor na elastyczne zniekształcenie korpusu.	 T-FORK	Zasada kamertonu: Rezonans wynikający z elektromagnetycznego wzbudzenia powoduje drgania.
 BT	Interfejs danych Bluetooth: do przesyłania danych z wagi do drukarki, komputera czy urządzeń peryferyjnych.	 PERCENT	Określenie procentowe: określenie procentowego odchylenia w stosunku do wielkości docelowej (100 %).	 FORCE	Kompensacja siły elektromagnetycznej: Cewka wewnątrz magnesu stałego. Dla wagi bardzo dokładnych.
 WLAN	Interfejs danych WLAN: do transferu danych z wagi do drukarki, komputera czy urządzeń peryferyjnych	 UNIT	Jednostki ważenia: mogą być zmienione niemetryczne za pomocą przycisku. Wejść na stronę internetową KERN i zobacz więcej szczegółów. Dolny i górny limit można indywidualnie zaprogramować np. dozowanie, sortowanie czy porcjowanie.	 SC TECH	Technologia pojedynczego ogniwa: Zaawansowana wersja zasady kompensacji z wysoką dokładnością.
 SWITCH	Wyjścia sterowania (wyłącznik optyczny, cyfrowy I/O): do podłączenia przełączników, lampek sygnalizacyjnych, zaworów itp.	 MOVE	Ważenie bez wibracji: (program do ważenia zwierząt) Gdy warunki podczas ważenia są niestabilne, waga właściwa jest obliczana jako średnia wartość.	 M +3 DAYS	Możliwa legalizacja: czas potrzebny na legalizację jest określony w piktogramie.
 DUAL	Interfejs drugiej wagi: do bezpośredniego podłączenia drugiej wagi.	 GLP INTERN	Raport GLP/ISO: Na wadze wyświetlona jest waga, data oraz czas, pomimo połączenia z drukarką.	 DAkKS +3 DAYS	Możliwa kalibracja DAkKS: Czas do przeprowadzenia kalibracji DAkKS jest pokazany w dniach na piktogramie.
 LAN	Interfejs sieciowy: do podłączenia skali do sieci Ethernet. Dla produktów Kerna można użyć konwertera RS-232/LAN.	 IP	Ochrona przed kurzem i rozbryzgiwaną wodą IPxx: Typ ochrony jest pokazany na piktogramie. Szczegóły w słowniczku.	 1 DAY	Wysyłka w paczce: Czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki jest pokazany na piktogramie.
 GLP PRINTER	Raport GLP/ISO: z wagą, danymi i datą. Tylko z drukarkami KERN, zobacz „Akcesoria”	 ATEX	Ochrona przed eksplozją ATEX: Nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach przemysłowych, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Oznaczenie ATEX jest określone dla każdego urządzenia.	 2 DAYS	Wysyłka na palecie: Czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki jest pokazany w dniach na piktogramie.
 PCS	Liczenie ważonych elementów: powiązane ze spisem w tabeli. Na wyświetlaczu widać elementy i ich wagę.	 INOX	Ze stali nierdzewnej. Waga jest chroniona przed korozją.	 3 YEARS WARRANTY	Gwarancja: Okres gwarancji jest pokazany na piktogramie.

Naszym biznesem jest precyzja

Do zapewnienia wysokiej precyzji Twojej wagi KERN oferuje wiele odpowiednich testów w granicach błędów w międzynarodowej klasie OIML E1-M3 od 1 mg - 2000 kg. W połączeniu ze świadectwem wzorcowania DKD można przeprowadzić właściwą kalibrację.

Dzisiejsze laboratorium kalibracji DAkKS KERN jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wyposażonych laboratoriów kalibracji wag, testów ważenia oraz i obciążeń urządzeń pomiarowych w Europie.

Dystrybutor KERN:



MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 8644 621, +48 61 8644 600, fax: +48 61 8651 933

e-mail: laboratorium@merazet.pl, <http://www.merazet.pl>

Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji, możemy przeprowadzić kalibrację wag DKD, testowanie ważenia oraz obciążeń urządzeń pomiarowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zakres usługi:

- kalibracja wagi z maksymalnym obciążeniem do 6 t
- kalibracja wagi w zakresie od 1 mg – 500 kg
- zarządzanie bazą danych jeśli chodzi o sprawdzanie wyposażenia oraz przypominanie o serwisie
- kalibracja obciążeń pomiarowych urządzeń
- świadectwo wzorcowania DKD w dostępnych językach.