

SUSZARKA LABORATORYJNA ET115

🏠 Suszarki laboratoryjne > Suszarka laboratoryjna ET 115




Wybrane parametry produktu

- pojemność: 115 litry;
- obieg powietrza: wymuszony;
- zakres temperatur: 50-250°C;
- maksymalny załadunek: 45 kg;
- ilość półek (std/max): 2/6;
- czas nagrzewania do 150°C: 24 min;
- czas powrotu do 150°C po otwarciu drzwi na 30 s. : 6 min;
- wymiary zewnętrzne (szer/wys/głęb w mm): 685 x 750 x 750;
- wymiary wewnętrzne (szer/wys/głęb w mm): 463 x 544 x 456;
- czujnik otwartych drzwi zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury.



Zdjęcia produktu

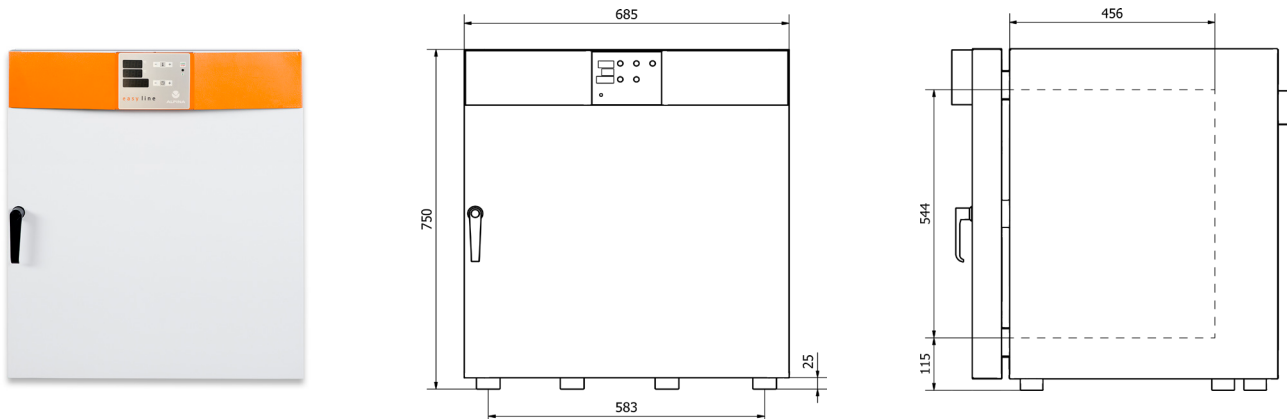

Charakterystyka produktu

- uszczelnienie – HEAT PRO. Dzięki odpowiedniej izolacji termicznej ograniczono straty ciepła, co daje wymierne oszczędności w kosztach energii
- podwójny system bezpieczeństwa – dwa niezależne systemy zapobiegające przekroczeniu temperatury maksymalnej: elektroniczny oraz mechaniczny zgodnie z normą DIN 12880
- narożniki wnętrza specjalnie zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby gwarantowały łatwe utrzymanie czystości
- niezależnie od wielkości wsadu istnieje możliwość podziału wnętrza komory na różne wysokości
- panel sterowania z łatwym dostępem do poszczególnych funkcji i ustawień, jeden przycisk – jedna funkcja
- precyzję pomiaru i utrzymania temperatury gwarantuje platynowy czujnik PT100
- drzwi otwierane pod szerokim kątem 105° co pozwala na lepszy i łatwiejszy dostęp do wnętrza suszarki
- cztery tryby pracy: godzinowy, dobowy, ciągły, opóźniony start
- wnętrze suszarki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dopuszczonej do stosowania w przemyśle: farmaceutycznym, spożywczym i podobnym
- obudowa zewnętrzna wykonana ze stali malowanej farbą proszkową
- gwarancja 24 miesiące – produkt w całości zaprojektowany i wykonany w Polsce, zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- doświadczenie w produkcji – od 11 lat produkujemy suszarki i inny sprzęt laboratoryjny, gwarantując klientom sprawdzoną i bezawaryjną konstrukcję, intuicyjne sterowanie oraz utrzymanie najwyższych standardów jakościowych.



Podstawowe informacje	ET 115
Zakres temperatury (°C)	50-250
Pojemność (L)	115
Waga (kg)	65
Maksymalny załadunek (kg)	45
Maksymalny załadunek na półkę (kg)	15
Ilość półek (std./maks.)	2/6
Efektywność temperaturowa wg DIN 12880	
Odchylenia przestrzenne temperatury od wartości zadanej 150°C	+/- 2,7
Odchylenia w punkcie od zadanej temperatury 150°C	+/- 0,3
Czas nagrzewania do temperatury 150°C (min)	24
Czas powrotu do 150°C po otwarciu drzwi na 30 sek. (min)	6
Parametry elektryczne	
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Moc znamionowa (kW)	2,0
Bezpiecznik (A)	10
Faza (ph)	1
Wymiary zewnętrzne	
Szerokość (mm)	685
Wysokość (mm)	750
Głębokość (mm)	750
Wymiary wewnętrzne	
Szerokość (mm)	463
Wysokość (mm)	544
Głębokość (mm)	456
Wykonanie, materiały i malowanie	
Obudowa	Stal DC01, pokryta farbą proszkową RAL 7035
Wnętrze	Stal nierdzewna 1.4301

Informacje zawarte w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych zamieszczonych na stronach www mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. ALPINA nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych. Informacje prezentowane w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent ALPINA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych urządzeniach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Podane wymiary urządzeń mogą ulec nieznacznej zmianie. Kolory podane na www/ulotach mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z techniki fotografii / ustawień monitora / druku. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy nie wchodzące w skład standardowej dostawy, a będące dodatkowo płatnymi akcesoriami bądź dodatkami. Wiążące potwierdzenie co do zakresu dostawy otrzymają Państwo w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez naszego pracownika.